

SeaMed®

İNFÜZYON ISITICI



Kan ve serum ısıtıcısı, infüzyon ve transfüzyon işlemlerinde olası hipotermi riskini ortadan kaldırmak için hastaya verilecek sıvıların kontrollü olarak ısıtılmasını sağlayan cihazdır. Standart kan transfüzyonu infüzyonu, intravenöz ve beslenmede kullanıma uygundur.

Kompakt yapı, ergonomik tasarım

Kuru ısıtıcı sistemi

Kolay ve hızlı ayar imkanı

Mikroişlemci kontrollü 3 sıcaklık sensörü

ile etkin ve homojen ısıtma

Aşırı sıcaklık güvenlik sistemi sayesinde

durdurma özelliği


Uyarı Alarm Sistemi

Hassasiyet: 0.1 derece

Sıcaklık ayar aralığı: 33°C-42°C

Hastaya giden sıvı sıcaklığı dijital

ekrandan izlenebilir.

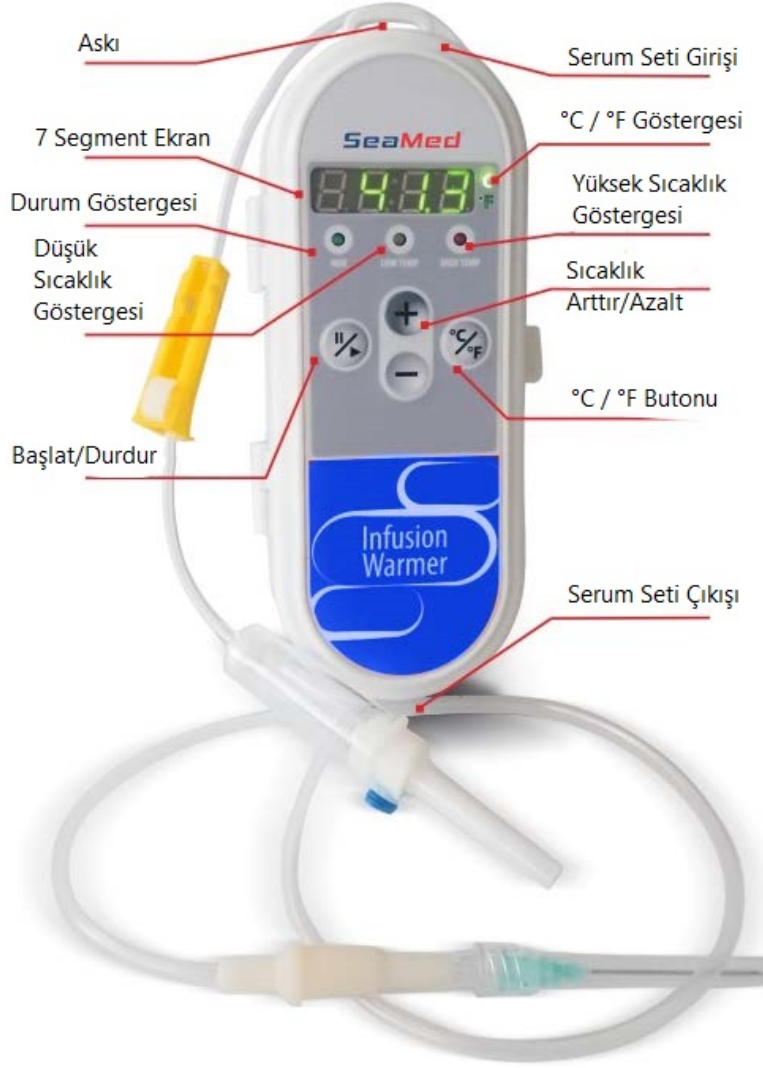

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Sıcaklık Ayarı | 33°C - 42°C |
| Güç | 220V/50Hz |
| Güç Tüketimi | Maks. 120VA |
| Sıvı Korunma Derecesi | IP44 |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1.0°C |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | 42°C ±1°C/43°C±2°C |
| Düşük Sıcaklık Koruması | -3 °C |
| Isıtma Süresi | -2 dk (20°C-39°C) |
| Ağırlık | 276 gr |
| Ölçüler | 36x67x65 mm |
| Kullanım Modu | Sürekli |

