


Disposable enteral feeding set
Tek Kullanımlık Enteral Beslenme Seti



EASY TO USE
SMART TO FEED

KULLANIMI KOLAY BESLEME İÇİN AKILLI

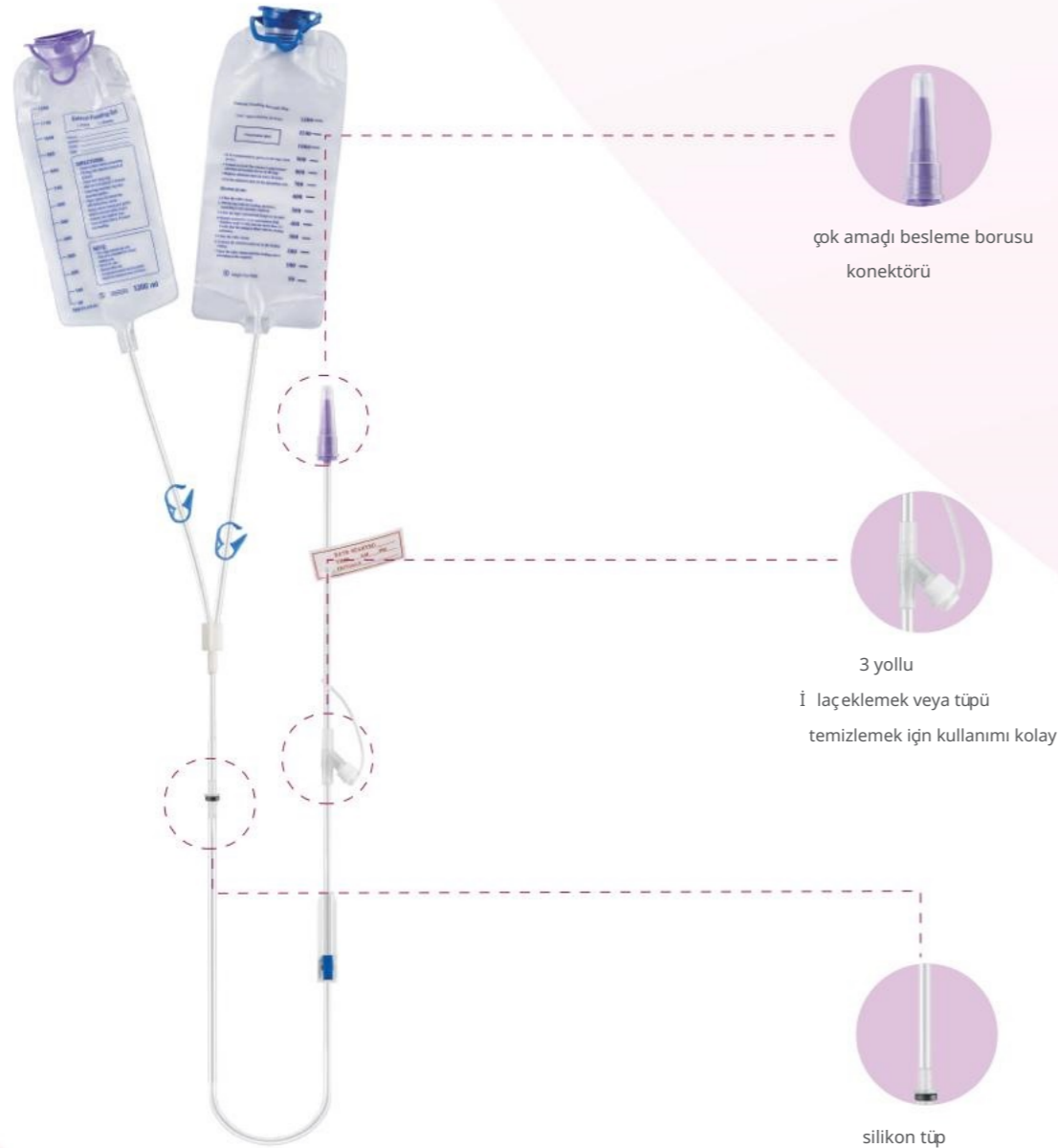

	model numarası	Ürün Açıklaması	adet/kutu
Pompa	A5	Çift çanta, silikon tüp	50

Not: Silikon tüp uzunluğ u 110 mm'dir.

Nutricare-300H Enteral Besleme Pompası

Nutricare-300H

Nutricare-300H, hastanede ve evde bakımda çift torba su ve besin beslemesi için tasarlanmış akıllı bir pompa.




Kullanımı kolay ve beslemesi akıllı olan Nutricare-300H, kullanımı basit ve hassas bir enteral besleme pompasıdır. Beslenmeyi verimli bir şekilde sunmak için tasarlanan Nutricare-300H, hastalara daha iyi bakım sunarken klinisyenlerin doğru işlevler görmesini sağlayan akıllı besleme ve programlanabilir yıkama sağlar.



Sezgisel dokunuş

3,5 inç dokunmatik ekran, öğ renmesi kolay arayüz, kısa öğ renme eğri

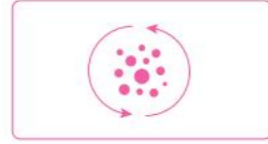

Güvenli

Görsel ve sesli alarmlar ve serbest akış önleyici sistem, güvenli besleme sağlar



Hızlı

2 saniyelik başlatma, 4 saniyelik sıvı yükleme ve verme



Ergonomik tasarım

0,8 kg'lık kompakt hafif tasarım, kolay hareket etmeyi sağlar ve yuvarlak şekiller, kolay dekontaminasyon sağlar



İsteğe bağlı ısıtıcı

Ayarlanabilir beslenme sıcaklığı hasta konforunu artırır



Kablosuz birlikte çalışabilirlik

Besleme izlemeyi her yerde gerçekleştirmek için HK-M1000 infüzyon yazılımına bağlanarak iş akışını basitleştirin

Şartlandırma

modeli	Nutricare-300H
Pompa Mekanizması	Döner peristaltik
Besleme Modu	Sürekli Besleme, Aralıklı Besleme 1-1200
Akış Hızı Aralığı	ml/sa, 1 ml/sa artışlarla
Verilecek hacim (VTBD)	(0,0, 1,0-9999,9)ml, 0,1 ml'lik artışlarla;"0,0", besleme sınırı olmadığı anlamına gelir
Birikmiş besleme hacmi	0.0-36000.0ml
Keskinlik	±%10
BOLUS Oranı	1 ml/saat artışlarla 1-1200 ml/saat
BOLUS Hacmi	(0,0, 1,0-9999,9)ml, 0,1 ml'lik artışlarla
Tasfiye İşlevi	Otomatik Boşaltma, Manuel Boşaltma 700~1200 ml/sa, 1 ml/sa artışlarla; 0,1 ml'lik artışlarla 0,0,1,0-9999,9 ml
Yıkama Oranı	1 ml/sa artışlarla 1-1200 ml/sa (0,0,
Boşaltma Hacmi	1,0-9999,9)ml, 0,1 ml artışlarla
Geri Pompalama İşlevi	Otomatik Geri Pompalama, Manuel Geri Pompalama (1 ml/sa artışlarla 1-1200 ml/sa; 0,1 ml artışlarla 0,01,0-9999,9 ml)
Oklüzyon Basıncı	7 ayarlanabilir seviyede 20~80 kPa
Pil ömrü	3000 mAh: 25 ml/saatte 14 saat, 125 ml/saatte 13 saat, 1200 ml/saatte 10 saat; 7000 mAh: 25 ml/saatte 23 saat, 125 ml/saatte 21 saat, 1200 ml/saatte 19 saat;
Hafıza boyutları	50000'den fazla kayıt
boyutlar	145 L×100(G)×94(Y) 0,8
Ağırlık	kg (direk kelepçesi olmadan)
Giriş gücü	120VA
Su geçirmez	IP24
Tüpü Ağı Tut (KTO)	0~30ml/sa, 1 ml/sa artışlarla
Alarm	Kapı açık, Oklüzyon, Bitmek üzere, İşlevi unutulmuş, İnfüzyon tamamlanıyor, Düşük Pil, Pil bitmiş, arıza vb.
Besleme Çantası	Tek torba/çift torba 50 uL,
Hava kabarcığı tespiti	100uL, 250uL, 500uL, 800uL Destek
Kullanım Yeri	masa üstü kullanım veya serum askısı montajı
İsteğe Bağlı İşlev	WIFI, Özel tüp, Hemşire çağırma, Isıtma