

ALLTION



AC-5000 Serisi Optik Kolposkop



ANDA
MEDIKAL


Aydınlatma Sistemi

F250 objektif lensle 50.000 Lux'un üzerinde maksimum aydınlatma. En yüksek yakınlaştırmada bile yeterli aydınlatmayı sağlar ve daha net görmenizi sağlar. Renk sıcaklığı 5700K, CRI≥%85.

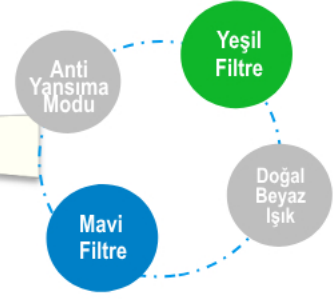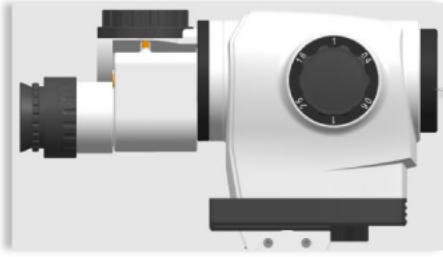

Yatay Ayarlama Fonksiyonu

Yatay ayar yapısına sahip ana ayna, kullanıcının yatay veya açılı olarak gözlem yapmasına olanak sağlar.

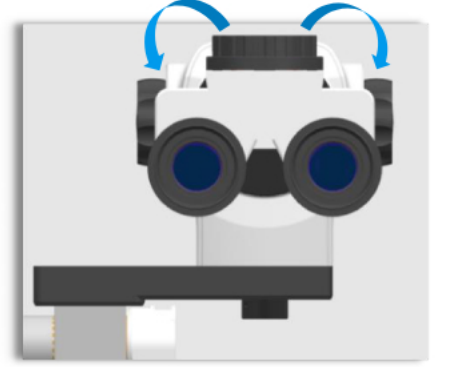

Akıllı Tasarım

Çok fonksiyonlu kontrol kolu ; kolposkop başlığının altında yeterli alan tutarak kullanımı kolaylaştırır ve çalışma için yeterli alan sağlar.

Dahili Kablo Tasarımı

Tüm kablolar kollara yerleştirilmiştir, yalnızca kafa bağlantısındaki bazı kablolar açıkta kalır. Daha rahat ve sorunsuz hareket ederek kliniğinizin daha iyi ve kaliteli olmasını sağlar.

Ekran Braketi (Opsiyonel)

Çift HDMI Çıkışı



AC-5000 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

	Özellik	Standart	Opsiyonel
OPTİK	Yakınlaştırma	Manuel 5 kademeli (2.6X/ 3.9X/ 6.4X/ 10.3X/ 16.1X)	
	Gözbebekleri Arası		
	Uzaklık	50-75 mm	
	Mercek Alanı	12.5X/18B ; diopter ayarı ile ±7D	10X/21B ; diopter ayarı ile ±7D
	Mercek Teknolojisi	Apokromatik Mercek	
AYDINLATMA	Objektif Lens	250 - 430 mm	
	LED	50.000 saat ve üzer ömürlü LED	
	Nesne Aydınlatma	≥ 50.000 lux (250 mm'de)	
	CRI	≥ %85	
	Renk Sıcaklığı	5.700 Kelvin	
GÜÇ KAYNAĞI	Aydınlatma Modu	Mavi Filtre/ Yeşil Filtre / Doğal Beyaz Işık	Anti Yansıma Modu / Lazer Filtre
	Voltaj	Giriş: AC 100-240V, 50/60Hz, Çıkış: DC12V/3A	
	Giriş Gücü	25-60VA	
STAND	Stand	5 Tekerlekli Mobil	
	Kol	Açılı Kol	
	KAMERA	Dahili Kamera	

DAHİLİ KAMEA ÖZELLİKLERİ

Sensör	1/1.8" SONY 4K CMOS
Çözünürlük	3840x2160, 60 FPS, (16:9)
Depolama	Harici USB Bellek Bağlanılabilir
Format	JPG, MP4
Basit Fonksiyonlar	Dondur, Fotoğraf, Video, Otomatik Pozlama, Beyaz Dengesi, Geri Oynat
Görüntü Efektleri	Poz Değeri, Parlaklık, Kazanım, Kırmızı Kazanım, Mavi Kazanım, Saturasyon, Kontrast, HDR
Gelişmiş Fonksiyonlar	Yatay Çevir, Dikey Çevir, Uzaklaş, Yakınlaş
Görüntü Aktarımı	WIFI ve HDMI ile Gerçek zamanlı görüntü aktarımı
Sistem Ayarları	Otomatik/otonom adlandırma, kireç göster/gizle, LOGO göster/gizle, sürüm bilgisi, çözünürlük ayarı, Adlandırma Ayarı, sistem güncelleme, fabrika ayarlarına sıfırlama, dahili WIFI/harici WIFI

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com
info@andamedikal.com

